

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/005394

International filing date: 24 March 2005 (24.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-378559
Filing date: 28 December 2004 (28.12.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 20 May 2005 (20.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 1 2 月 2 8 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 3 7 8 5 5 9


パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号
J P 2 0 0 4 - 3 7 8 5 5 9
The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

出 願 人
Applicant(s): 株式会社 I D X テ ク ノ ロ ジ ー ス

2 0 0 5 年 4 月 2 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川

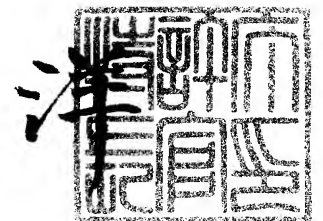

【書類名】 特許願
【整理番号】 IDXT0001
【特記事項】 特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G01N 27/64
G01N 27/62

【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋茅場町三丁目12番9号 株式会社IDXT
テクノロジーズ内
【氏名】 桐原 直俊

【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋茅場町三丁目12番9号 株式会社IDXT
テクノロジーズ内
【氏名】 北田 学文

【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋茅場町三丁目12番9号 株式会社IDXT
テクノロジーズ内
【氏名】 高橋 健二

【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋茅場町三丁目12番9号 株式会社IDXT
テクノロジーズ内
【氏名】 吉田 晴亮

【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋茅場町三丁目12番9号 株式会社IDXT
テクノロジーズ内
【氏名】 田中 瑞穂

【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋茅場町三丁目12番9号 株式会社IDXT
テクノロジーズ内
【氏名】 鈴木 康夫

【特許出願人】
【識別番号】 502317493
【氏名又は名称】 株式会社 IDXTテクノロジーズ

【代理人】
【識別番号】 100127845
【弁理士】
【氏名又は名称】 石川 壽彦

【国等の委託研究の成果に係る記載事項】 平成16年度、新エネルギー・産業技術総合
開発機構、知的基盤創成・利用促進研究開発、ダイオキシン類等
の迅速超微量物分析装置の研究開発委託研究、産業活力再生特別
措置法第30条の適用を受ける特許出願

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 221155
【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

超音速ジェット多光子共鳴イオン化法を用いたレーザーイオン化質量分析によるダイオキシン類の分析方法において、

濃度既知である複数のダイオキシン類異性体についてダイオキシン類異性体ごとに特定波長スペクトルを取得し、該取得された各特定波長スペクトルについて複数の特定波長を選択し、該選択された特定波長におけるイオン信号量とダイオキシン類異性体濃度との関係を表す検量線を各ダイオキシン類異性体について前記選択された全ての特定波長ごとに作成する第 1 の工程と、

第 1 の工程で作成した各ダイオキシン類異性体の検量線に基づき、複数の特定波長におけるイオン信号量と複数のダイオキシン類異性体濃度との関係を表す感度行列を作成する第 2 の工程と、

被分析試料の特定波長スペクトルを取得し、該特定波長スペクトルのイオン信号量と第 2 の工程で得た感度行列を用いて、前記被分析試料の複数のダイオキシン類異性体の濃度を定量する第 3 の工程とを備え、

第 1 の工程における特定波長スペクトルは、ダイオキシン類異性体を第 1 の波長を有する第 1 のレーザー光で励起し、励起されたダイオキシン類異性体を第 2 の波長を有する第 2 のレーザー光でイオン化してイオン信号量を計測する操作を前記第 1 のレーザー光の波長を順次変えながら繰り返すことによって取得するものとし、該取得された各特定波長スペクトルにおいて選択する複数の特定波長について、

(1) ダイオキシン類異性体が 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDD (ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン) の場合の特定波長として、317.66nm、317.36nm、315.10nm、314.60nm、314.37nm、313.65nm、312.96nm、312.80nm、312.20nm、311.90nm、311.61nm、311.00nm、310.39nm、310.12nm からなる群のうち少なくとも一つの波長を用い、

(2) ダイオキシン類異性体が OCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン) の場合の特定波長として、321.85nm、321.14nm、319.76nm、317.90nm、316.23nm、315.80nm、315.48nm、315.21nm、314.57nm、312.60nm、312.04nm、311.69nm、310.87nm からなる群のうち少なくとも一つの波長を用い、

(3) ダイオキシン類異性体が OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) の場合の特定波長として、329.89nm、329.41nm、329.28nm、329.11nm、329.02nm、328.93nm、327.35nm、326.38nm、325.48nm からなる群のうち少なくとも一つの波長を用いることを特徴とするダイオキシン類の分析方法。

【請求項 2】

第 2 工程は、被分析試料に含まれるダイオキシン類異性体を同定する工程を含み、該工程で同定されたダイオキシン類異性体の検量線に基づいて感度行列を作成することを特徴とする請求項 1 記載のダイオキシン類の分析方法。

【請求項 3】

第 2 工程は、第 1 工程で作成した全ての検量線に基づいて感度行列を作成することを特徴とする請求項 1 に記載のダイオキシン類の分析方法。

【請求項 4】

超音速ジェット多光子共鳴イオン化法を用いたレーザーイオン化質量分析による特定波長スペクトルからダイオキシン類異性体を同定する分析方法であって、

被分析試料の特定波長スペクトルを取得する第 1 工程と、該第 1 工程で取得した特定波長スペクトルと予め求めた 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDD (ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン) の特定波長に基づいて前記被分析試料に含まれる 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDD (ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン) を同定する第 2 工程とを含み、前記第 1 の工程における特定波長スペクトルは、被分析試料を第 1 の波長を有する第 1 のレーザー光で励起し、励起された被分析試料を第 2 の波長を有する第 2 のレーザー光でイオン化してイオン信号量を計測する操作を前記第 1 のレーザー光の波長を順次変えながら繰り返すことによって取得するものとし、前記第 2 工程で用いる 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDD (ヘプタクロロジベンゾ

ーパラージオキシン)の特定波長として下記の表に示されるものの中から少なくとも2つを選択し、該選択した特定波長において前記第1工程で取得した特定波長スペクトルが特定波長を示すかどうかで判定することを特徴とするダイオキシン類の分析方法。

【表1】

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDD (ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン)	
	特定波長[nm]
①	317.66
②	317.36
③	315.10
④	314.60
⑤	314.37
⑥	313.65
⑦	312.96
⑧	312.80
⑨	312.20
⑩	311.90
⑪	311.61
⑫	311.00
⑬	310.39
⑭	310.12

【請求項5】

超音速ジェット多光子共鳴イオン化法を用いたレーザーイオン化質量分析による特定波長スペクトルからダイオキシン類異性体を同定する分析方法であって、

被分析試料の特定波長スペクトルを取得する第1工程と、該第1工程で取得した特定波長スペクトルと予め求めたOCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン)の特定波長に基づいて前記被分析試料に含まれるOCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン)を同定する第2工程とを含み、前記第1の工程における特定波長スペクトルは、被分析試料を第1の波長を有する第1のレーザー光で励起し、励起された被分析試料を第2の波長を有する第2のレーザー光でイオン化してイオン信号量を計測する操作を前記第1のレーザー光の波長を順次変えながら繰り返すことによって取得するものとし、前記第2工程で用いるOCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン)の特定波長として下記の表に示されるものの中から少なくとも2つを選択し、該選択した特定波長において前記第1工程で取得した特定波長スペクトルが特定波長を示すかどうかで判定することを特徴とするダイオキシン類の分析方法。

【表 2】

OCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン)	
	特定波長[nm]
①	321.85
②	321.14
③	319.76
④	317.90
⑤	316.23
⑥	315.80
⑦	315.48
⑧	315.21
⑨	314.57
⑩	312.60
⑪	312.04
⑫	311.69
⑬	310.87

【請求項 6】

超音速ジェット多光子共鳴イオン化法を用いたレーザーイオン化質量分析による特定波長スペクトルからダイオキシン類異性体を同定する分析方法であって、

被分析試料の特定波長スペクトルを取得する第 1 工程と、該第 1 工程で取得した特定波長スペクトルと予め求めた OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) の特定波長に基づいて前記被分析試料に含まれる OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) を同定する第 2 工程とを含み、前記第 1 の工程における特定波長スペクトルは、被分析試料を第 1 の波長を有する第 1 のレーザー光で励起し、励起された被分析試料を第 2 の波長を有する第 2 のレーザー光でイオン化してイオン信号量を計測する操作を前記第 1 のレーザー光の波長を順次変えながら繰り返すことによって取得するものとし、前記第 2 工程で用いる OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) の特定波長として下記の表に示されるものの中から少なくとも 2 つを選択し、該選択した特定波長において前記第 1 工程で取得した特定波長スペクトルが特定波長を示すかどうかで判定することを特徴とするダイオキシン類の分析方法。

【表 3】

OCDF（オクタクロロジベンゾフラン）	
	特定波長[nm]
①	329. 89
②	329. 41
③	329. 28
④	329. 11
⑤	329. 02
⑥	328. 93
⑦	327. 35
⑧	326. 38
⑨	325. 48

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ダイオキシン類の分析方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、ガス中に含まれているダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措置法により規定されたダイオキシン類：ポリクロロジベンゾパラダイオキシン、ポリクロロジベンゾフラン、コプラナポリクロロビフェニル）をレーザーイオン化質量分析方法によりリアルタイムで分析するダイオキシン類の分析方法に関する。

【背景技術】

【0002】

例えば一般廃棄物、産業廃棄物などの焼却炉、污泥焼却炉などの各種焼却炉、熱分解炉、溶融炉などから排出される排ガスには、有害な有機化合物が含まれていることが確認されており、その中でも極めて猛毒の多塩素化ダイオキシンおよびその誘導体（以下「ダイオキシン類」という）の高感度な分析方法の開発が望まれている。

ごみ焼却炉等から排出されるダイオキシン類の濃度分析にあたり、公定法として定められている方法は、高分解能ガスクロマトグラフ（HRGC）と高分解能二重収束形質量分析計（HRMS）を用いる手法である（JIS K 0311）。この方法は、極低濃度で存在するダイオキシン類を高感度で分析する手法として確立されているが、一方で測定の手順が非常に煩雑であり、分析に30日～50日の期間を要するという問題点を抱えている。

そのため、ダイオキシン類の迅速且つ高感度な分析方法が期待されており、高感度分析が可能なレーザー分析法の適用が考えられている。

【0003】

そこで、このような高感度分析が可能なレーザー分析法として、超音速分子ジェット法とレーザー多光子イオン化法とを組み合わせることにより、試料中の塩素化有機化合物のスペクトルを測定するという提案がなされている（例えば非特許文献1）。この提案では、試料を真空中に噴出させ、瞬時に絶対零度近傍まで冷却することによって、スペクトルを単純化している。

【0004】

また、試料にレーザー光を照射して標的物質を選択的にイオン化させ、標的物質を検出する方法が提案されている（例えば特許文献1）。

【0005】

さらに、第1のレーザー光で励起され、励起三重項状態に移動した標的物質をイオン化できるように、固定波長の第2のレーザー光を使用することによりイオン化効率を向上させる二波長光イオン化質量分析装置が提案されている（例えば特許文献2）。

【非特許文献1】 Rapid Commun. Mass Spectrom. 誌、第7巻、183(1993年)

【特許文献1】 特開平8-222181号公報

【特許文献2】 特開2002-202289号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

非特許文献1に開示された方法では、ダイオキシン類の検出下限がppbオーダーであり、排ガス中の含まれるダイオキシン類を直接分析するには $10^5 \sim 10^6$ 倍の濃縮または高感度化が必要になり、現実には検出が困難であるという問題がある。

また、特許文献1に開示された方法において、ダイオキシン類のような塩素原子を含む有機化合物を直接分析しようとする、塩素原子数が多くなるにつれて、いわゆる重原子効果により励起三重項状態にある標的物質の励起寿命が短くなる。このため、十分な感度を得ることができないという問題がある。

【0007】

特許文献2においては、当該文献に開示された方法でイオン化効率が向上する理由は以下の通りであるとされている。すなわち、ダイオキシン類を第1の波長を有する第1のレ

ーザー光で励起状態S₁に励起させると、内部重原子効果により速やかに励起状態T₁にエネルギー移動する。この励起状態T₁の寿命は μ s程度と励起状態S₁の寿命に対して長いので、励起状態T₁にある分子をイオン化するための第2の波長を有する第2のレーザー光を照射することで効率的にイオン化することが可能となる。

したがって、特許文献2の方法では、ダイオキシン類を励起状態S₁に励起させるための第1の波長を有する第1のレーザー光を照射することを前提としている。

しかし、多様な標的物質の各々について、標的物質を基底状態から励起状態へ移行させるための第1のレーザー光の最適な波長については特許文献2には開示されておらず、また、他の文献においてもこれを示したものはない。

【0008】

本発明はかかる課題を解決するためになされたものであり、超音速ジェット多光子共鳴イオン化法によるレーザーイオン化質量分析方法において、標的物質以外の夾雑物が多く存在する場合であっても夾雑物の影響をなくして高感度な検出ができるダイオキシン類の分析方法を得ることを目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0009】

1) 請求項1の発明

本発明に係るダイオキシン類の分析方法は、超音速ジェット多光子共鳴イオン化法を用いたレーザーイオン化質量分析において、濃度既知である複数のダイオキシン類異性体についてダイオキシン類異性体ごとに特定波長スペクトルを取得し、該取得された各特定波長スペクトルについて複数の特定波長を選択し、該選択された特定波長におけるイオン信号量とダイオキシン類異性体濃度との関係を表す検量線を各ダイオキシン類異性体について前記選択された全ての特定波長ごとに作成する第1の工程と、

第1の工程で作成した各ダイオキシン類異性体の検量線に基づき、複数の特定波長におけるイオン信号量と複数のダイオキシン類異性体濃度との関係を表す感度行列を作成する第2の工程と、

被分析試料の特定波長スペクトルを取得し、該特定波長スペクトルのイオン信号量と第2の工程で得た感度行列を用いて、前記被分析試料の複数のダイオキシン類異性体の濃度を定量する第3の工程と、を備え

第1の工程における特定波長スペクトルは、ダイオキシン類異性体を第1の波長を有する第1のレーザー光で励起し、励起されたダイオキシン類異性体を第2の波長を有する第2のレーザー光でイオン化してイオン信号量を計測する操作を前記第1のレーザー光の波長を順次変えながら繰り返すことによって取得するものとし、該取得された各特定波長スペクトルにおいて選択する複数の特定波長について、

(1) ダイオキシン類異性体が1,2,3,4,6,7,8-HpCDD(ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン)の場合の特定波長として、317.66nm、317.36nm、315.10nm、314.60nm、314.37nm、313.65nm、312.96nm、312.80nm、312.20nm、311.90nm、311.61nm、311.00nm、310.39nm、310.12nmからなる群のうち少なくとも一つの波長を用い、

(2) ダイオキシン類異性体がOCDD(オクタクロロジベンゾーパラージオキシン)の場合の特定波長として、321.85nm、321.14nm、319.76nm、317.90nm、316.23nm、315.80nm、315.48nm、315.21nm、314.57nm、312.60nm、312.04nm、311.69nm、310.87nmからなる群のうち少なくとも一つの波長を用い、

(3) ダイオキシン類異性体がOCDF(オクタクロロジベンゾフラン)の場合の特定波長として、329.89nm、329.41nm、329.28nm、329.11nm、329.02nm、328.93nm、327.35nm、326.38nm、325.48nmからなる群のうち少なくとも一つの波長を用いるものである。

【0010】

超音速ジェット多光子共鳴イオン化法を用いたレーザーイオン化質量分析によるダイオキシン類の分析方法においては、高速パルスパルプを通してノズルより真空中に噴射されたガス中のダイオキシン類は、イオン化ゾーンにおいて励起用レーザー光により基底状態から励起状態へ選択的に移行され、ダイオキシン類のイオン化エネルギーから前記励起用

レーザー光子エネルギーを差し引いたエネルギー以上の光子エネルギーを有するイオン化用レーザー光によりイオン化される。イオン化されたダイオキシン類の分子は電場によって質量分析装置に引き込まれ、質量分析装置にてイオン信号量を検出され、質量分析される。質量分析装置としては、飛行時間型質量分析計、二重収束型質量分析計、四重極質量分析計、イオントラップ式質量分析計などを用いることができる。

【0011】

<第1の工程>

第1の工程は濃度既知である複数のダイオキシン類異性体についてダイオキシン類異性体ごとに特定波長スペクトルを取得するが、その際に、ダイオキシン類異性体を第1の波長を有する第1のレーザー光で励起し、励起されたダイオキシン類異性体を第2の波長を有する第2のレーザー光でイオン化してイオン信号量を計測する操作を前記第1のレーザー光の波長を順次変えながら繰り返すことによって取得する。すなわち、濃度既知である複数のダイオキシン類異性体について励起用レーザー光の波長を300nm～340nmまで0.01nmずつ変えることにより、横軸に励起用レーザー光の波長を表し、縦軸に励起用レーザー光により励起しイオン化用レーザー光によりイオン化されたダイオキシン類異性体のイオン信号量を表す各ダイオキシン類異性体の特定波長スペクトルを取得する。

ここで、波長213nmのレーザー光をイオン化用レーザー光とした場合の3種類の7塩素化、8塩素化ダイオキシン類異性体の特定波長スペクトル図及び該特定波長スペクトルについて複数の特定波長を表にしたものを図1～図3に示す。

なお、図1～図3の表における信号強度は、それぞれの異性体毎に、最も強い信号強度を1として規格化して示してある。

【0012】

特定波長スペクトルを取得した後、該特定波長スペクトルについて複数の特定波長を選択する。この選択の基準としては、以下のように定めることが好ましい。0.1～0.5nmの波長間隔において、イオン信号量の大きいピークを示す波長に着目し、その周囲の波長により小さいイオン信号量のピークが存在する場合に、ダイオキシン体ではピーク群のほぼ中央の最も高いイオン信号量のピークを示す波長を特定波長とし、順次選択の対象とする波長領域をずらして選択する。また、フラン体ではピーク群の内短波長側の最も高いイオン信号量のピークを示す波長を特定波長とする。選択の対象とする波長間隔を0.1～0.5nmとしたのは、イオン信号量のピークがブロードになっている場合でも特定波長を選択できるようにするためである。

各ダイオキシン類異性体についての特定波長スペクトルにおいて選択された全ての特定波長 λ についてイオン信号量とダイオキシン類異性体濃度との関係を表す下記数1に示す検量線を求める。ここでは説明を簡易にするため、イオン信号量とダイオキシン類濃度との関係を一次式で表しているが、他の関数として表してもよいことは言うまでもない。

【数1】

$$S = aC + b$$

但し、S ;イオン信号量

a ; 係数

C ; ダイオキシン類濃度

b ; 定数

【0013】

仮に、図1～3に示した3種類のダイオキシン類異性体についてそれぞれ2つの特定波長を選択するものとする。そして、図1に示したダイオキシン類異性体を異性体1とし、図の順にしたがって異性体2、3とし、異性体1については特定波長 λ_1 、 λ_2 を選択し、異性体2については特定波長 λ_3 、 λ_4 を選択し、同様にして異性体3特定波長 λ_5 、 λ_6 を選択する。

【0014】

ダイオキシン類異性体 1、2、3 について、全ての特定波長 λ_1 、 λ_2 、 \dots 、 λ_5 、 λ_6 について検量線を下記数 2 のように求める。

【数 2】

$$S_1(\lambda_1) = a_{11}C + b_{11}$$

$$S_1(\lambda_2) = a_{21}C + b_{21}$$

\dots

\dots

$$S_1(\lambda_5) = a_{51}C + b_{51}$$

$$S_1(\lambda_6) = a_{61}C + b_{61}$$

$$S_2(\lambda_1) = a_{12}C + b_{12}$$

$$S_2(\lambda_2) = a_{22}C + b_{22}$$

\dots

\dots

$$S_2(\lambda_5) = a_{52}C + b_{52}$$

$$S_2(\lambda_6) = a_{62}C + b_{62}$$

$$S_3(\lambda_1) = a_{13}C + b_{13}$$

$$S_3(\lambda_2) = a_{23}C + b_{23}$$

\dots

\dots

$$S_3(\lambda_5) = a_{53}C + b_{53}$$

$$S_3(\lambda_6) = a_{63}C + b_{63}$$

【0 0 1 5】

< 第 2 の工程 >

第 2 の工程は、第 1 の工程で作成した各ダイオキシン類異性体の各特定波長についての検量線に基づき、複数の特定波長におけるイオン信号量と複数のダイオキシン類異性体濃度との関係を表す感度行列を作成する工程である。

この工程では、まず、被分析試料に含まれるダイオキシン類異性体を同定し、それを前提として感度行列を作成する場合と、同定しないで感度行列を作成する場合が含まれる。

ここでは、被分析試料に含まれるダイオキシン類異性体を同定する場合を例に挙げて説明する。

なお、特定波長スペクトルは個々のダイオキシン類異性体によって異なり、それぞれ特徴的な特定波長スペクトルを有している。従って、複数のダイオキシン類異性体を含む被分析試料の特定波長スペクトルは、そこに含まれるダイオキシン類異性体の特定波長スペクトルの各パターンが重畳して現れる。そこで、この被分析試料の特定波長スペクトルのプロフィールと予め求めている標準試料の特定波長スペクトルのプロフィールとを比較して、被分析試料に含まれるダイオキシン類異性体を同定することができる。

【0 0 1 6】

被分析試料中に 2 種のダイオキシン類異性体 1、2 が同定され、それぞれ濃度 C_1 、 C_2 で含まれているとして、波長 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 、 λ_4 における被分析試料のイオン信号量を $S(\lambda_1)$ 、 $S(\lambda_2)$ 、 $S(\lambda_3)$ 、 $S(\lambda_4)$ とすると、下記数 3 の連立方程式を立てることができる。

【数 3】

$$S(\lambda_1) = a_{11}C_1 + a_{12}C_2 + b_1$$

$$S(\lambda_2) = a_{21}C_1 + a_{22}C_2 + b_2$$

$$S(\lambda_3) = a_{31}C_1 + a_{32}C_2 + b_3$$

$$S(\lambda_4) = a_{41}C_1 + a_{42}C_2 + b_4$$

但し、 $b_1 = b_{11} + b_{12}$ 、 $b_2 = b_{21} + b_{22}$ 、 $b_3 = b_{31} + b_{32}$ 、 $b_4 = b_{41} + b_{42}$

【0 0 1 7】

上記の連立方程式を行列で表すと、下記数 4 となり、下式の A を感度行列と呼ぶ。

【数 4】

$$S = AC + B$$

$$S = \begin{bmatrix} S(\lambda_1) \\ S(\lambda_2) \\ S(\lambda_3) \\ S(\lambda_4) \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \\ a_{41} & a_{42} \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

【0 0 1 8】

< 第 3 の工程 >

第 3 の工程は、被分析試料の特定波長スペクトルを取得し、該特定波長スペクトルのイオン信号量と第 2 の工程で得た感度行列を用いて、前記被分析試料の複数のダイオキシン類異性体の濃度を定量する工程である。

この工程では、まず被分析試料の特定波長スペクトルを、第 1 の工程と同様に励起用レーザー光の波長を 300nm ～ 340nm まで 0.01nm ずつ掃引することにより取得する。

この例では、上記のダイオキシン類異性体 1、2 が同定されているので、これらのダイオキシン類異性体 1、2 の特定波長である λ_1 、 λ_2 、 λ_3 、 λ_4 におけるイオン信号量 $S(\lambda_1)$ 、 $S(\lambda_2)$ 、 $S(\lambda_3)$ 、 $S(\lambda_4)$ を検出する。この検出値と前記感度行列に基づいて被分析試料に含まれるダイオキシン類異性体 1、2 の濃度 C を定量する。

具体的には、濃度 C は感度行列 A の逆行列 A^{-1} を用いて、 $C = A^{-1}(S - B)$ として算出できる。

【0 0 1 9】

なお、ダイオキシン類の特定波長スペクトルは広い波長域で特定波長が存在することが知られており、すべての波長において解析すると膨大なデータ量になってしまう。そこで、複数本の特定波長について得られる検量線を用いることでデータ処理量を少なくでき、複数のダイオキシン類の同時定量を濃度に関係なく迅速に分析できる。

【0 0 2 0】

なお、上記の各ダイオキシン類異性体について用いる特定波長の規定値については、±0.045

nm の誤差範囲を含むものとする。これは、高速パルスバルブから出た超高速ジェット状のダイオキシン類異性体を含むガスの冷却が不十分な場合、特定波長でのイオン信号量のピークがブロードとなることがあるからである。

この ±0.045 nm の誤差範囲を含む点は、請求項 2 ～ 6 の発明においても同様である。

【0 0 2 1】

2) 請求項 2 の発明

請求項 2 に係る発明は、上記 (1) に示した請求項 1 の発明における第 2 の工程が、被分析試料に含まれるダイオキシン類異性体を同定する工程を含み、該工程で同定されたダイオキシン類異性体の検量線に基づいて感度行列を作成するものである。

つまり、上記（１）の説明において述べたように、第２の工程において分析試料に含まれるダイオキシン類異性体を同定するようにしたので、感度行列が簡単になり、演算が容易になる。

なお、ダイオキシン類異性体を同定する方法については、特に限定されるものではないが、例えば、前述したように、既知のダイオキシン類異性体の特定波長スペクトルのプロフィールを用いて行うようにすればよい。

【００２２】

３）請求項３の発明

請求項３に係る発明は、上記（１）に示した請求項１の発明における第２の工程が第１工程で作成した全ての検量線に基づいて感度行列を作成するものである。

すなわち、この発明では感度行列を作成する段階では被分析試料に含まれるダイオキシン類異性体を同定しないものであり、感度行列が複雑である反面、ダイオキシン類異性体の同定工程を省略できるという効果がある。

具体的には、被分析試料中に３種全てのダイオキシン類異性体１、２・・・、３がそれぞれ濃度 C_1 、 C_2 、 C_3 で含まれているとして、波長 λ_1 、 λ_2 、・・・ λ_5 、 λ_6 におけるイオン信号量を $S(\lambda_1)$ 、 $S(\lambda_2)$ 、・・・ $S(\lambda_5)$ 、 $S(\lambda_6)$ として、行列式を求めると、下記数５となり、その他は前記の同定を含む場合と同様の手順により定量ができる。

【００２３】

【数５】

$$S=AC+B$$

$$S = \begin{bmatrix} S(\lambda_1) \\ S(\lambda_2) \\ \dots\dots\dots \\ S(\lambda_5) \\ S(\lambda_6) \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \dots\dots\dots \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots\dots\dots \\ b_5 \\ b_6 \end{bmatrix}$$

【００２４】

４）請求項４の発明

請求項４の発明に係るダイオキシン類の分析方法は、超音速ジェット多光子共鳴イオン化法を用いたレーザーイオン化質量分析による特定波長スペクトルからダイオキシン類異性体を同定するものであって、

被分析試料の特定波長スペクトルを取得する第１工程と、該第１工程で取得した特定波長スペクトルと予め求めた１，２，３，４，６，７，８-ＨｐＣＤＤ（ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン）の特定波長に基づいて前記被分析試料に含まれる１，２，３，４，６，７，８-ＨｐＣＤＤ（ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン）を同定する第２工程とを含み、前記第１の工程における特定波長スペクトルは、被分析試料を第１の波長を有する第１のレーザー光で励起し、励起された被分析試料を第２の波長を有する第２のレーザー光でイオン化してイオン信号量を計測する操作を前記第１のレーザー光の波長を順次変えながら繰り返すことによって取得するものとし、前記第２工程で用いる１，２，３，４，６，７，８-ＨｐＣＤＤ（ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン）の特定波長として下記の表に示されるものの中から少なくとも２つを選択し、該選択した特定波長において前記第１工程で取得した特定波長スペクトルが特定波長を示すかどうかで判定することを特徴とするものである。

【表 4】

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDD (ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン)	
	特定波長[nm]
①	317.66
②	317.36
③	315.10
④	314.60
⑤	314.37
⑥	313.65
⑦	312.96
⑧	312.80
⑨	312.20
⑩	311.90
⑪	311.61
⑫	311.00
⑬	310.39
⑭	310.12

【0025】

(5) 請求項5の発明

請求項3の発明に係るダイオキシン類の分析方法は、超音速ジェット多光子共鳴イオン化法を用いたレーザーイオン化質量分析による特定波長スペクトルからダイオキシン類異性体を同定するものであって、

被分析試料の特定波長スペクトルを取得する第1工程と、該第1工程で取得した特定波長スペクトルと予め求めたOCDD（オクタクロロジベンゾーパラージオキシン）の特定波長に基づいて前記被分析試料に含まれるOCDD（オクタクロロジベンゾーパラージオキシン）を同定する第2工程とを含み、前記第1の工程における特定波長スペクトルは、被分析試料を第1の波長を有する第1のレーザー光で励起し、励起された被分析試料を第2の波長を有する第2のレーザー光でイオン化してイオン信号量を計測する操作を前記第1のレーザー光の波長を順次変えながら繰り返すことによって取得するものとし、前記第2工程で用いるOCDD（オクタクロロジベンゾーパラージオキシン）の特定波長として下記の表に示されるものの中から少なくとも2つを選択し、該選択した特定波長において前記第1工程で取得した特定波長スペクトルが特定波長を示すかどうかで判定することを特徴とするものである。

【表 5】

OCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン)	
	特定波長[nm]
①	321. 85
②	321. 14
③	319. 76
④	317. 90
⑤	316. 23
⑥	315. 80
⑦	315. 48
⑧	315. 21
⑨	314. 57
⑩	312. 60
⑪	312. 04
⑫	311. 69
⑬	310. 87

【 0 0 2 6 】

6) 請求項 6 の発明

請求項 4 の発明に係るダイオキシン類の分析方法は、超音速ジェット多光子共鳴イオン化法を用いたレーザーイオン化質量分析による特定波長スペクトルからダイオキシン類異性体を同定するものであって、

被分析試料の特定波長スペクトルを取得する第 1 工程と、該第 1 工程で取得した特定波長スペクトルと予め求めた OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) の特定波長に基づいて前記被分析試料に含まれる OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) を同定する第 2 工程とを含み、前記第 1 の工程における特定波長スペクトルは、被分析試料を第 1 の波長を有する第 1 のレーザー光で励起し、励起された被分析試料を第 2 の波長を有する第 2 のレーザー光でイオン化してイオン信号量を計測する操作を前記第 1 のレーザー光の波長を順次変えながら繰り返すことによって取得するものとし、前記第 2 工程で用いる OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) の特定波長として下記の表に示されるものの中から少なくとも 2 つを選択し、該選択した特定波長において前記第 1 工程で取得した特定波長スペクトルが特定波長を示すかどうかで判定することを特徴とするものである。

【表 6】

OCDF (オクタクロロジベンゾフラン)	
	特定波長[nm]
①	329.89
②	329.41
③	329.28
④	329.11
⑤	329.02
⑥	328.93
⑦	327.35
⑧	326.38
⑨	325.48

【発明の効果】

【0027】

請求項1～3の本発明によれば、超音速ジェット多光子共鳴イオン化法によるレーザーイオン化質量分析方法において、被分析試料中に含まれる7塩素化、8塩素化ダイオキシン類の異性体を高精度で同時に定量することができる。

また、請求項4～6の発明によれば、複数のダイオキシン類の異性体を含む被分析試料に特定のダイオキシン類の異性体が含まれているかどうかを正確に判定できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0028】

図4は本実施の形態に係るダイオキシン類の分析方法に用いるレーザーイオン化質量分析装置の構成の説明図である。以下、図4に基づいて本実施の形態に用いるレーザーイオン化質量分析装置を概説する。

ガス発生装置1で発生したキャリアガス中に含まれるダイオキシン類は、キャリアガスと共に高速パルスバルブ2に供給され、ノズルから真空容器内3へ噴射され、十分に冷却される。ノズルから真空中に噴射されたキャリアガス中のダイオキシン類は波長可変レーザー発振器4から出射される励起用レーザー光とイオン化レーザー発振器5から出射されるイオン化用レーザー光により、イオン化ゾーンにおいて励起・イオン化される。

イオン化されたダイオキシン類はリペラー電極と引き出し電極間に発生している引力静電場によって質量分析器6（リフレクトロン型飛行時間質量分析装置）に引き込まれる。すなわち、引力電場によって加速されたダイオキシン類イオンは引き出し電極と接地電極間に発生している引力電場によってさらに加速され、且つパルス圧縮される。接地電極を通過したイオンはアインツェルレンズの静電場によって進行方向と垂直な径方向に絞られ、その後、偏向電極での電場によってイオンの軌道が曲げられる。偏向電極を通過したイオンは、差動排気用開口を通過し、質量分析器6に導かれるのである。質量分析器6に導かれたイオン化されたダイオキシン類は、イオン反射電極によって軌道が曲げられ、イオン検出器に到達し、電気信号に変化され、演算装置7によりデータ処理される。

【0029】

ガス発生装置1としては、例えばガステック社製の高沸点有機物定濃度ガス発生装置が用いられ、一定濃度のダイオキシン類を高速パルスバルブ2に供給する。

高速パルスバルブ2のノズル径は、例えばφ1.1mmが好ましい。また、ダイオキシン類の吸着を防ぐ為にノズル温度は200℃以上が好ましい。

真空容器3内にはレーザー光を多重反射させてイオン化ゾーンにレーザー光を蓄積する

ことにより感度向上させる多重反射装置が設けられている。この多重反射装置は複数の凹面鏡を環状に配列してなる２組のミラーセットを左右に対向配置してなる。

ダイオキシシン励起用波長可変レーザー発振器４はナノ秒パルスレーザー光であり、色素レーザー発振器や光パラメトリック発振器を使用することができる。選択的にダイオキシシン類を励起させるために、励起用レーザー光のスペクトル線幅は 0.01nm 以下が好ましい。

励起用レーザー光のエネルギーは 1mJ 程度で、過大なレーザー強度によるフラグメンテーションを防ぐため、ダイオキシシン類への照射の際にレンズ等による集光はしない。

【００３０】

イオン化用レーザー発振器５はNd:YAGレーザー発振器であり、５倍波（波長 213nm ）でナノ秒パルスレーザー光をイオン化レーザー光として使用する。５倍波による１色２光子イオン化を避けるために、イオン化用レーザー光のエネルギーは 0.1mJ 以下が好ましい。上記レーザー同様、レンズ等による集光はしない。

遅延パルス発生器により時間的に重なって同期された励起用レーザー光とイオン化用レーザー光はレーザー光混合器を用いて、見かけ上重なった１本のレーザー光にされ、レーザー光は真空中に入射され、真空中に噴射されたキャリアガス中のダイオキシシン類にイオン化ゾーンにおいて同時に照射される。

【００３１】

上記の装置を用いた本実施の形態に係るダイオキシシン類の分析方法について、 $1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\text{-HpCDD}$ （ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシシン）、 $OCDD$ （オクタクロロジベンゾーパラージオキシシン）、 $OCDF$ （オクタクロロジベンゾフラン）が含まれたガスを被分析試料とした場合を例に挙げて説明する。

濃度既知の $1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\text{-HpCDD}$ （ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシシン）、 $OCDD$ （オクタクロロジベンゾーパラージオキシシン）、 $OCDF$ （オクタクロロジベンゾフラン）を含む複数のダイオキシシン類異性体について励起用レーザー光の波長を $300\text{nm} \sim 340\text{nm}$ まで 0.01nm ずつ掃引することにより、各ダイオキシシン類異性体の特定波長スペクトルを取得する。

このとき、取得された $1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\text{-HpCDD}$ （ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシシン）、 $OCDD$ （オクタクロロジベンゾーパラージオキシシン）、 $OCDF$ （オクタクロロジベンゾフラン）の特定波長スペクトルは、図１～３に示す通りである。

図１～３に示される特定波長スペクトルについて、 $1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\text{-HpCDD}$ （ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシシン）の特定波長として $\lambda_1=317.66\text{nm}$ 、 $\lambda_2=317.36\text{nm}$ を選択し、 $OCDD$ （オクタクロロジベンゾーパラージオキシシン）の特定波長としては $\lambda_3=321.85\text{nm}$ 、 $\lambda_4=321.14\text{nm}$ を選択し、 $OCDF$ （オクタクロロジベンゾフラン）の特定波長としては $\lambda_5=329.89\text{nm}$ 、 $\lambda_6=329.41\text{nm}$ を選択する。

【００３２】

次に選択された特定波長 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 、 λ_4 、 λ_5 、 λ_6 におけるイオン信号量とダイオキシシン類異性体濃度との関係を表す検量線を各ダイオキシシン類異性体について前記選択された全ての特定波長ごとに作成する。

$1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\text{-HpCDD}$ （ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシシン）の濃度を $C_1[\text{ppt}]$ 、 $OCDD$ （オクタクロロジベンゾーパラージオキシシン）の濃度を $C_2[\text{ppt}]$ 、 $OCDF$ （オクタクロロジベンゾフラン）の濃度を $C_3[\text{ppt}]$ として、それぞれの波長において求めた検量線を示すと下記のようなになる。

$$\begin{aligned} S_{1234678DD}(\lambda_1) &= 4C_1 + 0.02, & S_{1234678DD}(\lambda_2) &= 5C_1 + 0.02, \\ S_{OCDD}(\lambda_3) &= 5C_2 + 0.05, & S_{OCDD}(\lambda_4) &= 2C_2 + 0.01, \\ S_{OCDF}(\lambda_5) &= 2C_3 + 0.04, & S_{OCDF}(\lambda_6) &= 4C_3 + 0.04 \end{aligned}$$

【００３３】

以上のような検量線が予め求められており、それらがデータベースとして保有されている。

以上を前提として、 $1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\text{-HpCDD}$ （ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシシン

)、OCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン)、OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) が含まれた被分析試料について励起用レーザー光の波長を300nm~340nmまで0.01nm ずつ掃引することにより、被分析試料の特定波長スペクトルを取得する。このとき取得された被分析試料の特定波長スペクトルを図5に示す。

被分析試料にどのようなダイオキシン類異性体が含まれているか不明の場合には、取得された被分析試料の特定波長スペクトルと予め取得されている標準試料の特定波長スペクトルに基づいて被分析試料に含まれるダイオキシン類異性体を同定する。被分析試料の特定波長スペクトルについて長波長側から順に特定波長に着目して、当該特定波長と同波長の特定波長を有するダイオキシン類異性体を同定する。特定波長 $\lambda_1=329.89\text{nm}$ と同一の特定波長を有するダイオキシン類異性体の特定波長スペクトルを参照する。波長329.89nmが特定波長となっているダイオキシン類異性体としては、図3に示すように、OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) がある。OCDFの特定波長スペクトルを参照すると、前記329.89nmの他に329.41nmが特定波長となっている。そこで今度は逆に、被分析試料の特定波長スペクトルを参照したときと329.41nmが特定波長となっている。これによって、被分析試料にはOCDF (オクタクロロジベンゾフラン) が含まれていると同定する。

同様の手順によって、1,2,3,4,6,7,8-HpCDD (ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン)、OCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン) を同定する。

【0034】

被分析試料の中に1,2,3,4,6,7,8-HpCDD (ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン)、OCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン)、OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) が含まれていることが同定されると、次に、予め作成した検量線から被分析試料に含まれる1,2,3,4,6,7,8-HpCDD (ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン)、OCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン)、OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) を定量するための感度行列を作成する。

この例では、被分析試料に含まれるダイオキシン類異性体が同定されており、感度行列の作成に用いる検量線は上記に示した1,2,3,4,6,7,8-HpCDD (ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン)、OCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン)、OCDF (オクタクロロジベンゾフラン) の検量線の中から1つの波長を用いればよい。例えば λ_1 、 λ_3 、 λ_5 の検量線を用いると、感度行列を求めるための連立方程式は次のようになる。

$$S_{1234678DD}(\lambda_1)=4C_1+0.02$$

$$S_{OCDD}(\lambda_3)=5C_2+0.05$$

$$S_{OCDF}(\lambda_5)=2C_3+0.04$$

【0035】

上記の連立方程式を行列で表すと、下記数6となる。

【数6】

$$S=AC+B$$

$$S=\begin{bmatrix} S(\lambda_1) \\ S(\lambda_3) \\ S(\lambda_5) \end{bmatrix} \quad A=\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.05 \\ 0.04 \end{bmatrix}$$

【0036】

したがって、感度行列Aの逆行列 A^{-1} は下記数7となる。

【数 7】

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.25 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

【0 0 3 7】

一方、 $\lambda_1=317.66\text{nm}$ 、 $\lambda_3=321.85\text{nm}$ 、 $\lambda_5=329.89\text{nm}$ における被分析試料のイオン信号強度を検出することによって、 $S(\lambda_1)$ 、 $S(\lambda_3)$ 、 $S(\lambda_5)$ を求める。ここで、 $S(\lambda_1)=50\text{ a.u.}$ 、 $S(\lambda_3)=100\text{ a.u.}$ 、 $S(\lambda_5)=120\text{ a.u.}$ であったとすれば、 $C_1=12.5\text{ [ppt]}$ 、 $C_2=20\text{ [ppt]}$ 、 $C_3=60\text{ [ppt]}$ となる。

したがって、被分析試料には、1,2,3,4,6,7,8-HpCDD（ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン）が12.5 [ppt]、OCDD（オクタクロロジベンゾーパラージオキシン）が20 [ppt]、OCDF（オクタクロロジベンゾフラン）が60 [ppt]含まれていることが検出できる。

【図面の簡単な説明】

【0 0 3 8】


【図 1】 本発明に係る1,2,3,4,6,7,8-HpCDD（ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン）特定波長スペクトル及び選択可能な複数の特定波長を示す図である。

【図 2】 本発明に係るOCDD（オクタクロロジベンゾーパラージオキシン）特定波長スペクトル及び選択可能な複数の特定波長を示す図である。


【図 3】 本発明に係るOCDF（オクタクロロジベンゾフラン）特定波長スペクトル及び選択可能な複数の特定波長を示す図である。

【図 4】 本発明の実施の形態に係るダイオキシン類の分析方法に用いるレーザーイオン化質量分析装置の構成の説明図である。


【図 5】 本発明の一実施の形態で用いた被分析試料の特定波長スペクトルを示す図である。

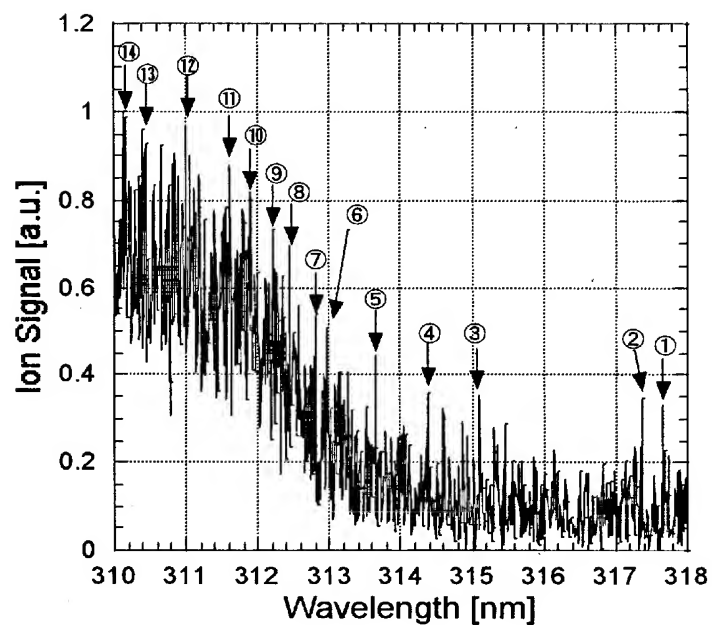

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDD (ヘプタクロロジベンゾーパラージオキシン)		
	特定波長 [nm]	イオン信号強度[a. u.]
①	317.66	0.33
②	317.36	0.35
③	315.10	0.35
④	314.60	0.32
⑤	314.37	0.36
⑥	313.65	0.44
⑦	312.96	0.51
⑧	312.80	0.54
⑨	312.20	0.73
⑩	311.90	0.82
⑪	311.61	0.87
⑫	311.00	0.97
⑬	310.39	0.96
⑭	310.12	1

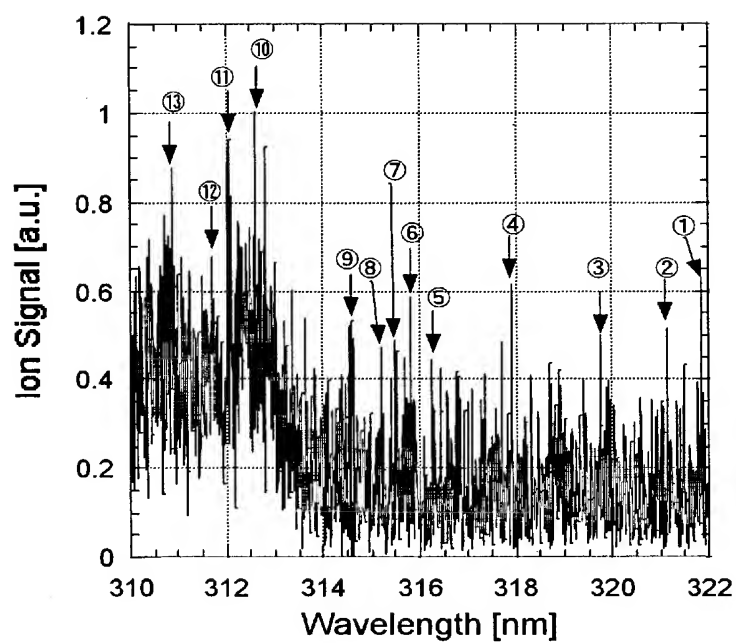


OCDD (オクタクロロジベンゾーパラージオキシン)		
	特定波長 [nm]	イオン信号強度[a. u.]
①	321.85	0.63
②	321.14	0.51
③	319.76	0.49
④	317.90	0.61
⑤	316.23	0.44
⑥	315.80	0.58
⑦	315.48	0.48
⑧	315.21	0.47
⑨	314.57	0.53
⑩	312.60	1
⑪	312.04	0.94
⑫	311.69	0.67
⑬	310.87	0.87

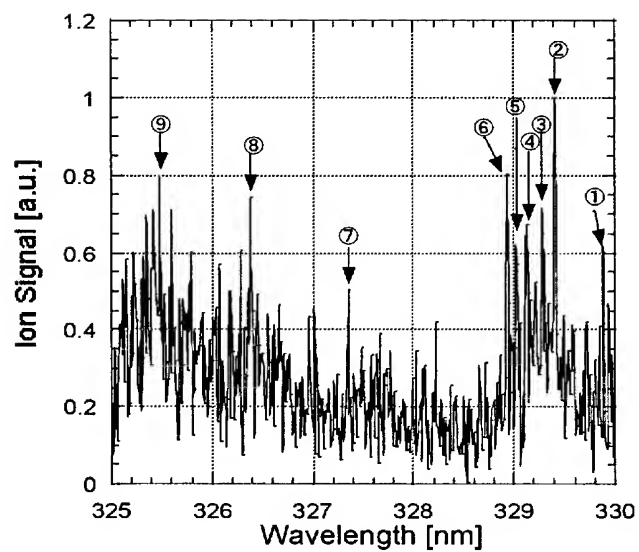


OCDF (オクタクロロジベンゾフラン)		
	特定波長 [nm]	イオン信号強度[a. u.]
①	329.89	0.62
②	329.41	1
③	329.28	0.71
④	329.11	0.67
⑤	329.02	0.62
⑥	328.93	0.8
⑦	327.35	0.51
⑧	326.38	0.74
⑨	325.48	0.79

【図 4】

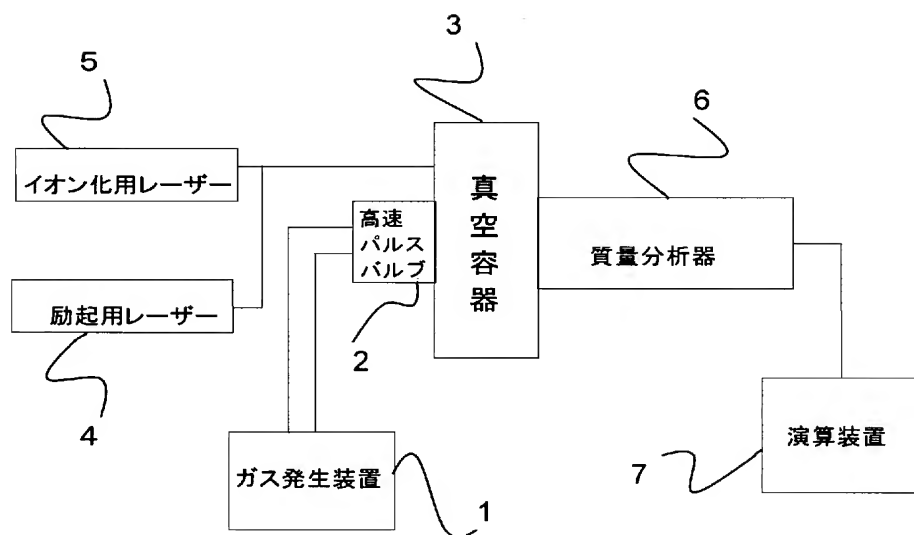

【図 5】

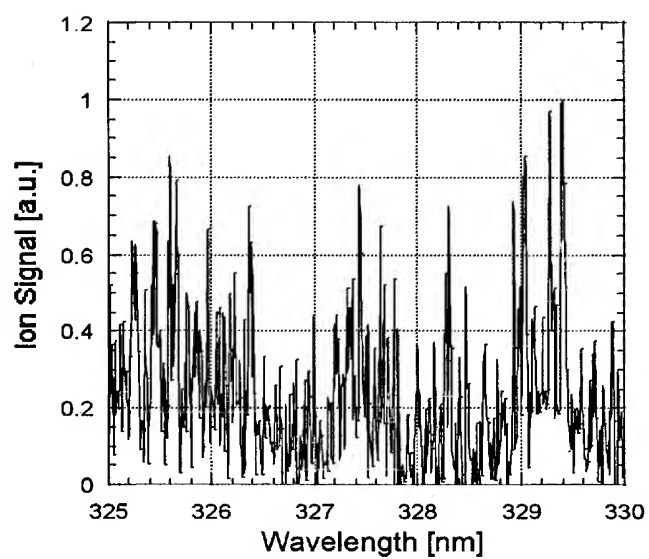

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高感度な検出ができるダイオキシン類の分析方法を得る。

【解決手段】 濃度既知である複数のダイオキシン類異性体についてダイオキシン類異性体ごとに特定波長スペクトルを取得し、該取得された各特定波長スペクトルについて複数の特定波長を選択し、該選択された特定波長におけるイオン信号量とダイオキシン類異性体濃度との関係を表す検量線を各ダイオキシン類異性体について前記選択された全ての特定波長ごとに作成する第1の工程と、第1の工程で作成した各ダイオキシン類異性体の検量線に基づき、複数の特定波長におけるイオン信号量と複数のダイオキシン類異性体濃度との関係を表す感度行列を作成する第2の工程と、被分析試料の特定波長スペクトルを取得し、該特定波長スペクトルのイオン信号量と第2の工程で得た感度行列を用いて、前記被分析試料の複数のダイオキシン類異性体の濃度を定量する第3の工程と、を備えた。

【選択図】 図1

【書類名】 手続補正書
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
 【出願番号】 特願2004-378559
【補正をする者】
 【識別番号】 502317493
 【氏名又は名称】 株式会社 I D X テクノロジーズ
【代理人】
 【識別番号】 100127845
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 石川 壽彦
【手続補正1】
 【補正対象書類名】 特許願
 【補正対象項目名】 提出物件の目録
 【補正方法】 追加
 【補正の内容】
 【提出物件の目録】
 【物件名】 代理権を証明する書面 1

【添付書類】



0/3

委任状

私は、

識別番号100127845 介理上 石川壽彦氏を以って代理人として下記事項を
委任します。

1. 特許出願(特願2004-378559)
に関する手続
1. 上記出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優
先権の主張及びその取下げ
1. 上記出願に関する出願の変更、出願の放棄及び出願の取下げ
1. 上記出願に関する拒絶査定に対する審判の請求
1. 上記出願に関する補正の却下の決定に対する審判の請求
1. 上記出願に係る特許権、実用新案権又は意匠権に基づく権利及びこれ
らに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄
1. 上記出願に係る特許に対する特許異議の申立てに関する手続
1. 上記出願に係る特許、特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録又
は意匠登録に対する無効審判の請求に関する手続
1. 上記出願に係る特許権又は実用新案権に関する訂正の審判の請求
1. 上記各項の手続に関する請求の取下げ、申請の取下げ又は申立ての取
下げ
1. 上記各項に関し行政不服審査法に基づく諸手続をなすこと
1. 上記各項の手続を処理するため、復代理人を選任及び解任すること

住 所 東京都中央区日本橋茅場町三丁目12番9号

名 称 株式会社IDXテクノロジーズ

代表者 鈴木 康夫



出願人履歴

5 0 2 3 1 7 4 9 3

20020830

新規登録

5 0 4 4 3 7 3 1 7

東京都品川区東五反田一丁目25番11号

株式会社 アイディエックス・テクノロジーズ

5 0 2 3 1 7 4 9 3

20050117

名称変更

5 0 4 4 3 7 3 1 7

東京都中央区日本橋茅場町三丁目12番9号

株式会社 I D X テクノロジーズ